

# Serie 2000XL

## 3-teilige Universal-Liege mit hydraulischer Höhenverstellung


... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 2010-00XL/H und 2011-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2010-03XL/H und 2011-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2010-04XL/H und 2011-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 2807-..XL/H entspricht Modell 2010-..XL/H, jedoch mit Nasenschlitz

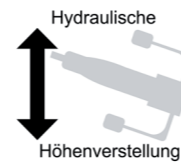

Beide Abb.:  
Modell 2010-00XL/H  
mit Ausstattungsoption:  
Fahrbar auf zentral  
feststellbaren Rollen  
(1180N),  
Papierrollenhalter  
(1270K/F);  
Polsterfarbe: 64-708 cherry

### Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Fußteil senkrecht abklappbar, dadurch variable Liegenlänge
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder positiv von 0° bis +60° verstellbar
- Kopfteillänge: 450 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 1.050 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -90° bis +30° verstellbar (senkrecht abklappbar)
- Fußteillänge: 450 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10  
Fahrbar auf 4 einzeln  
feststellbaren Comfort-  
Doppelrollen, Ø 100 mm,  
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen  
zentral feststellbar,  
Ø 100 mm,  
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185  
Fahrbar auf 4 Comfort-  
Doppelrollen zentral  
feststellbar, Ø 125 mm,  
Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N  
Rad-Hebe-System mit ergo-  
nomischen Fußhebeln zur  
gesteuerten Absenkung der  
Liege



### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270F/K / 1280F/K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter  
dem Kopfteil (70 mm vorstehend),  
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270K/F / 1280K/F  
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil  
(nicht vorstehend), für Liegenbreite  
700 mm / 800 mm

### Nasenschlitz




Art.-Nr. 1610  
Nasenschlitz, eingepolstert in das  
Kopfteil  
Art.-Nr. 1620  
Füllpolster für Nasenschlitz

### Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176  
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit  
Halterungen, für Liegenbreite  
700 mm / 800 mm

### Seitensicherungen

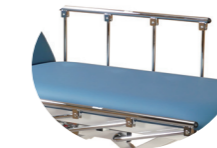

Art.-Nr. 1080-60  
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar,  
verchromt, komplett aus Stahlrohr,  
Länge 820 mm

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780  
Softpolster für hohen Liegekomfort  
aus Kaltschaum, für Liegenbreite  
700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782  
Polster mittelweich durch Kaltschaum-  
auflage, für Liegenbreite 700 mm /  
800 mm, Polsterstärke 70 mm

### Technische Daten:


- Manuell höhenverstellbar von 550 mm bis 970 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2010-..XL/H: 700 mm | Modell 2011-..XL/H: 800 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: min. 1.550 mm - max. 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai@ Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai@ Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

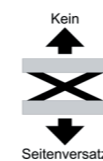

Druck- & Anzeigentechnisch kann es zu Farbabweichungen kommen, Maße sind ca. Angaben.  
Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

Stand 12.2024\_01  
Änderung der technischen Daten & Irrtümer vorbehalten.