

Echokardiographie-Liegen



3-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung ...

Modell 2690-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2690-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2690-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

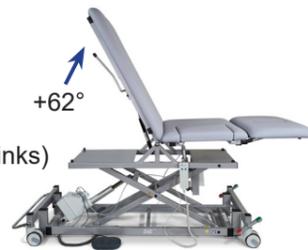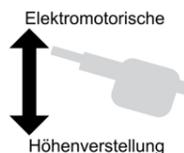

Alle Abb.:
Modell 2690-04XLE
mit Ausstattungsoption:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Rollen (1187)
in Sonderausführung mit
Fußbügel; Polsterfarbe
64-175 silbergrau



Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- Echoausschnitt im Mittelteil mit Füllpolster zum Verschließen (in Patiententrückenlage links)
- Mittelteil stufenlos elektromotorisch verstellbar, Bedienung durch einen Handschalter
- Mögliche Verstellpositionen u.a.: Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Bedienung des Elektromotors für die Höhenverstellung durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-30°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 400 mm, mit Nasenschlitz und Füllpolster
- Mittelteil (580 mm lang) stufenlos elektromotorisch positiv (+15°) und negativ (-15°) verstellbar
- Mittelteil mit Echoausschnitt und Füllpolster zum Verschließen: Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Fußteil stufenlos positiv (+62°) und negativ (-12°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Fußteil 970 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 630 mm bis 1.070 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1182
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1187
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit zentralem
Feststellsystem, Ø 100 mm, Untergestell
tiefergelegt,
dann Liegenhöhe 540 mm – 980 mm

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur
Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter



Art.-Nr. 1940E
1 Fixierung für Fußschalter am
Untergestell montiert

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit
Halterungen, für Liegenbreite
700 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270F/K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm



Art.-Nr. 1270F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil
(70 mm vorstehend), für Liegenbreite
700 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene
mit Befestigungskloben, komplett aus
Stahlrohr, Länge 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 700 mm,
Polsterstärke 70 mm

