


Serie 2800XL

3-teilige Therapieliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 2815-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010) Modell 2815-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006) Modell 2815-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



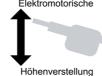



Alle Abb.:

Deutschland

Modell 2815-00XLE mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem (046), Entfall Fußschalter (091E-EF). Handschalter (090E): Polsterfarbe: 64-719 lime

Liegefläche 3-teilig

- Fußteil bis 75° positiv zu Sitzposition verstellbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 530 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Fußteillänge: 880 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 510 mm bis 950 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet





Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie







Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm. Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046 Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar. Ø 100 mm. Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185 Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar. Ø 125 mm. Grundhöhe + 50 mm



7/1/D

DEWERT

Art.-Nr. 045N Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der

1 Fixierung für Fußschalter am

Untergestell montiert

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E 1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 094E Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung: Stange drücken = Liege fährt nach oben Stange anheben = Liege fährt nach unten

Nasenschlitz

Art.-Nr. 1615-EF

Papierrollenhalter

Art.-Nr. 010K

Entfall Nasenschlitz

Papierrollenhalter, Befestigung unter

dem Kopfteil (nicht vorstehend),

Kopfteil 3-teilig (Art.-Nr. 056)

Anbau-Elemente

Art.-Nr. B1410

mm lang

1 Stück Normschiene 350

für Liegenbreite 700 mm. nicht bei



Art.-Nr. 091E 1 Fußschalter



Art.-Nr. 095E Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung: Stange drücken = Liege fährt nach oben Stange anheben = Liege fährt nach unten

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 056 Kopf 3-teilig mit Armstützen. stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K nicht möglich, Abmessungen: Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm



Art.-Nr. 010K/F Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007 Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm,

Polsterstärke 80 mm Art.-Nr. B1772

Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm,

Polsterstärke 70 mm

Armteil: L 500 mm x B 160 mm



Art.-Nr. B1430 1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. 088 1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar. zusätzlich dreh- und kippbar, fest angebracht



1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene



