


# Serie 2800XL

## 6-teilige Therapieliege mit hydraulischer Höhenverstellung

- Modell 2880-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 2880-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 2880-04XL/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

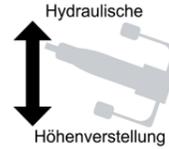

Modell 2880-00E (elektromotorische Höhenverstellung) mit Ausstattungsoptionen: Radhebesystem (045N), umlaufende Fußbedienung (095E); Polsterfarbe: 64-702 white

ohne  
Abbildung

### Grundausrüstung:

- Liegefläche 6-teilig
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Fußteil 4-teilig, quer und längs geteilt
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 6-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Mittelteillänge: 530 mm
- Fußteil 4-teilig, quer und längs geteilt
- Jedes Fußteilsegment einzeln stufenlos bis +60° verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem (Fußteil-Segmente unabhängig voneinander verstellbar)
- Untere Fußteilsegmente zusätzlich einzeln stufenlos bis -65° verstellbar durch Gasdruckfeder
- Fußteillänge: oberes Fußteil: 405 mm | unteres Fußteil: 485 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

### Technische Daten:



- Manuell höhenverstellbar von 590 mm bis 1.010 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 200 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



### Design:


Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai@ Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai@ Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

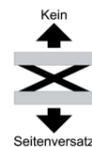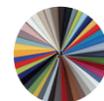

## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten

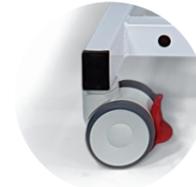

Art.-Nr. 040N  
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N  
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm, nicht bei Kopfteil 3-teilig (Art.-Nr. 056)

### Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 056  
Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K nicht möglich, Abmessungen: Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm, Armteil: L 500 mm x B 160 mm

### Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF  
Entfall Nasenschlitz

### Armstützen

ohne  
Abbildung

Art.-Nr. B088  
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, fest angebracht

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 009  
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1772  
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

