

Stehbrett für Echokardiographie

Stehbrett mit elektromotorischer Höhen- und Kippverstellung


... für Untersuchung, Behandlung ...

Modell 2095-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2095-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2095-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



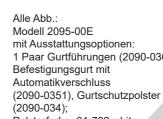







Grundausstattung:

Elektromotorisch

- Liegefläche 2-teilig, Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen
- Elektromotorische Höhenverstellung durch einen Fußschalter, elektromotorische Kippverstellung durch einen Handschalter (unabhängig voneinander)
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Höhenverstellung durch Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftschlusses
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- Mit Fußstütze (Stehplatte) gepolstert, einsteckbar in 2 angeschweißten Verbindungskloben, abnehmbar
- Je 1 Befestigungsschiene (25 x 25 mm) links und rechts der Liegefläche zur Aufnahme von Zubehör
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +45° verstellbar, Kopfteillänge: 800 mm
- Mit Echoausschnitt im Kopfteil: Abmessungen: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm Ausschnittseite: Patientenrückenlage links, mit Füllpolster zum Verschließen
- Fußteil fest, Fußteillänge: 1.130 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm

Technische Daten:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 620 mm bis 930 mm in 34 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Elektromotorische Kippverstellung von 0° bis +85° in 22 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm | Gesamtbreite der Liege: 850 mm
- Länge der Liegefläche: 1.930 mm | Gesamtlänge der Liege: 1.960 mm
- Belastbarkeit: 180 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet





Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- · Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie







Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E 1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E 1 Fußschalter

Haltegriffe



Art.-Nr. 2090-028 1 Paar Haltegriffe, klein



Art.-Nr. 2090-038 1 Paar Haltegriffe, groß

Gurtelemente



Art.-Nr. 2090-034 Gurtschutzpolster



Art.-Nr. 2090-035 1 Befestigungsgurt mit Klettverschluss



Art.-Nr. 2090-0351 1 Befestigungsgurt mit Automatikverschluss



7/1

DEWERT

Art.-Nr. 2090-036 1 Paar Gurtführungen

Armauflage



Art.-Nr. 2090-0143 Befestigungskloben für Armauflage

Art.-Nr. 2090-059 Armauflage

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1272 Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Weiteres Zubehör



Art.-Nr. 2090-090 Winkelgradanzeige, beidseitig der Liege

