



COMBI-UNTERSUCHUNGLIEGEN  
FÜR UNTERSUCHUNG, REKTOSKOPIE UND GYNÄKOLOGIE



SERIE **2000XL**

2025.1

... MIT 3-TEILIGER LIEGEFLÄCHE



... MIT 4-TEILIGER LIEGEFLÄCHE




... MIT NEIGUNGSVERSTELLUNG

Elektromotorische Höhenverstellung  
jetzt auch mit Drei-Stufen-Fußschalter



LIEGEN FÜR PRAXIS UND KRANKENHAUS

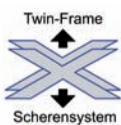

# Serie 2000XL - Liegen für Gynäkologie und Rektoskopie

## Gute Gründe für eine Combi-Untersuchungsliege der Serie 2000XL



### Inhalt

Gute Gründe für eine Combi-Untersuchungsliege der Serie 2000XL . . . . 3  
 Combi-Liegen für Untersuchung, Rektoskopie, Gynäkologie



#### 4-teilige Combi-Liegen:

- Modell 2640XLE . . . . . 6
- Modell 2640XL/H . . . . . 8

#### 3-teilige Combi-Liegen:

- Modell 2645XLE . . . . . 10
- Modell 2645XL/H . . . . . 12

#### 3-teilige Combi-Liegen mit Trendelenburg-Einstellung:

- Modell 2648XLE . . . . . 14




**Langlebig** ✓



**Robust** ✓



**Pflegeleicht** ✓

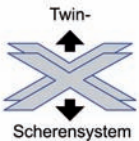

**Twin-Scherensystem** ✓



**Hohe Verstellgeschwindigkeit** ✓



Alle Modelle sind in den Gestell-Farben weiß, weißaluminium und graualuminium erhältlich.\*

\*Abb. von links nach rechts; Abweichungen zwischen den abgebildeten Farben und dem Original sind aus technischen Gründen möglich.



### Dewert-Hygiene-Ausstattung

Ermöglicht optimale Reinigung und Desinfizierbarkeit

- Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen

- Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite, verschlossen mit Luftausgleichskappen mit Ventilfunktion

- Einfache Hygiene durch offene Bauweise: Gute Erreichbarkeit aller Bauteile, keine im Alterungsprozess brechenden Kunststoffabdeckungen

- Optional: Innovatives Polsterbezugs-material Skai® Toronto EN mit staynu

# Serie 2000XL - Liegen für Gynäkologie und Rektoskopie

## Gute Gründe für eine Combi-Untersuchungsliege der Serie 2000XL



### Ausstattung:



- Haltegriffe an beiden Seiten des Sitzteils
- Herausziehbare VA-Schale in pflegeleichte HPL-Platte eingesetzt
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 100 mm
- Kloben zur Beinhalterbefestigung, optional verschiedene Beinhalter-Varianten erhältlich
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



### Technik:



- Liegengestell mit äußerst stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung mit hoher Belastbarkeit möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm
- Verwendung massiver Achsen mit Ø 20 mm



- Optimale Standsicherheit durch ausgewogenes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Robuste und langlebige Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt



- Verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen, spielfrei eingestellt zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte



### Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke: 80 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz → keine brechende Spanplatte bei Randbelastung
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff mit RG 46 und RG 75, Ökotex-zertifiziert → kein aus Abfallschaum und chemischen Klebstoffen hergestellter Verbundschaum, der sich im schnellen Alterungsprozess aufreißt
- Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:
  - Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
  - Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Reinigungsset für Skai-Produkte (Art.-Nr. 050-1000)  
 Inhalt:  
 • Zerstäuberflasche mit 200 ml Spezial-Skai-Reinigungsmittel  
 • 1 Mikrofaser-Pflegetuch 40 x 40 cm

# Serie 2000XL - Liegen für Gynäkologie und Rektoskopie

## Gute Gründe für eine Combi-Untersuchungsliege der Serie 2000XL

### ... mit 3-teiliger oder 4-teiliger Liegefläche:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Mittelteil bis 50° positiv durch Zahnstangensystem verstellbar
- Sitzteil mit rundem Ausschnitt, manuell neigbar bis 20°
- Bei 4-teiliger Liegefläche zusätzlich: Rektoteil, in der Höhe verstellbar



- Bei 3-teiliger Liegefläche und Neigungsverstellung zusätzlich:  
Elektromotorische Neigungsverstellung bis -15°, Bedienung durch Handschalter

### Höhenverstellung:

#### Hydraulisch höhenverstellbare Modelle

- Höhenverstellung durch starke Hydraulikpumpe mit optimaler Übersetzung für hohe Gewichte
- Stabile Tritthebel **beidseitig** der Liegefläche
- Belastbarkeit: 220 kg



#### Elektromotorisch höhenverstellbare Modelle

- Höhenverstellung durch leistungsstarken AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft und hoher Verstellgeschwindigkeit
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei Vollast
- EPR-Sicherheitsnetz-kabel mit Zugsicherung, 4 m Länge
- Integriertes Sicherheitskonzept (nach neuester BfArM-Empfehlung)
  - Automatisches Verriegeln des Elektromotors
  - Aktiver Freilauf in Abwärtsrichtung
  - Optional: Drei-Stufen-Fußschalter
- Belastbarkeit: 220 kg





# Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

## Integriertes Sicherheitskonzept

entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung




Sicherheit muss gerade bei elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen an oberster Stelle stehen.


Entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung sind unsere elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen konstruktiv mit Sicherheitselementen ausgestattet, die dem Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung bzw. dem Schutz des Bedieners während der Höhenverstellung dienen:


### Doppeltipp-Aktivierung:

Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung

- Automatisches Verriegeln des Elektromotors
- Nach 30 Sekunden Betätigung in eine Fahrtrichtung schaltet der Antrieb ab
- Freischaltung nur mit einer definierten Schaltfolge, dem **Doppeltipp**

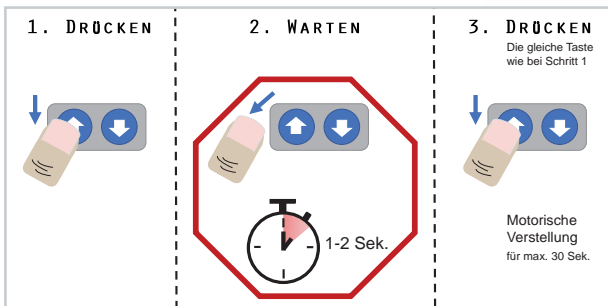

 Ein Video zum richtigen Umgang mit der Doppeltipp-Aktivierung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal

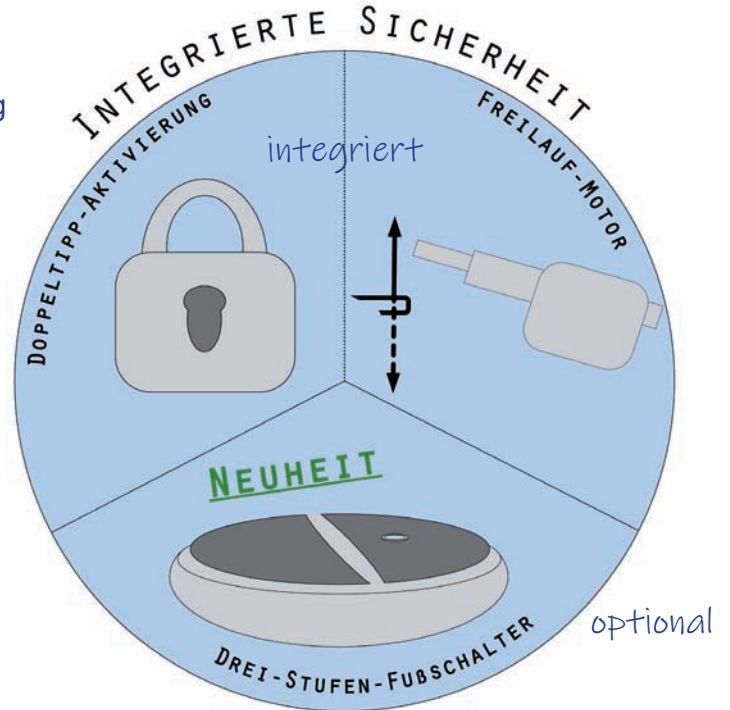

### Motor mit Freilauf-Kupplung: Schutz des Bedieners

- Aktiver Freilauf des Elektromotors in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftflusses



**OPTIONAL**



### Drei-Stufen-Fußschalter: Schutz des Bedieners

- Bei starkem Druck auf die Abwärtstaste wird eine **dritte Stufe** aktiviert. Dadurch stoppt der Motor sofort und verfährt anschließend automatisch einige cm nach oben, um den Bediener im Falle einer Einklemmung zu befreien.



 **Grundausrüstung bei Modellen mit elektromotorischer Höhenverstellung:**

**NEUE GRUNDAUSSTATTUNG:  
HANDSCHALTER  
MIT VERSENKTEM BEDIENFELD**



# Serie 2000XL


## 4-teilige Combi-Untersuchungsliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Rektoskopie, Gynäkologie ...

Modell 2640-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2640-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2640-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

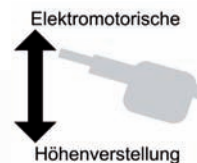

Alle Abb.:  
Modell 2640-03XLE  
mit Ausstattungsoption: Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit (1182), fahrbar auf zentralfeststellbaren Doppelrollen (1180N), Kopfteil verstellbar durch Gasdruckfeder (1655), Kopfteil mit Nasenschlitz und Füllpolster (1610, 1620), Papierrollenhalter (1265K), Normschiene (1410), Fußschalter anstelle von Handschalter;  
große Abb. zusätzlich:  
Beinhalter nach Göpel (1520);  
Polsterfarbe: 64-701 stone blue



### Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 100 mm
- Seitlich des Sitzteils befindet sich je ein Haltegriff
- Herausziehbare VA-Schale in pflegeleichter HPL-Platte eingesetzt
- Mit Kloben zur Beinhalterbefestigung (Beinhalter = Zubehör)
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

### Polsteraufteilung und Verstellung:



Liegefläche 4-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil bis 50° positiv durch Zahnstangensystem verstellbar
- Mittelteillänge: 930 mm
- Rektoteil in der Höhe verstellbar, 100 mm breit
- Sitzteil, mit rundem Ausschnitt, manuell neigbar bis 20° | Sitzteillänge: 400 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



### Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 620 mm bis 1.060 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Länge der Liegefläche: 1.980 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



### Design:


Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



# Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

## Fahrbarkeiten

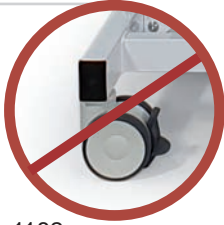


Art.-Nr. 1182  
Entfall der serienmäßigen  
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1180N  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral  
feststellbar, Ø 100 mm,  
Grundhöhe + 20 mm

## Nasenschlitz

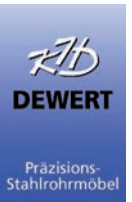

Art.-Nr. 1610  
Nasenschlitz, eingepolstert in das  
Kopfteil  
Art.-Nr. 1620  
Füllpolster für Nasenschlitz


## Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E  
1 Handschalter mit Magnet zur  
Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E  
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem  
Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor  
und verfährt um einige cm in die  
Gegenrichtung

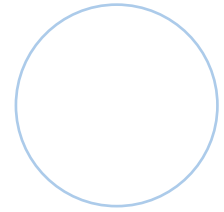

Art.-Nr. 1940-3E  
1 Fixierung für Fußschalter am  
Untergestell montiert

## Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1950E  
Längsseitige Fußbedienung mit  
Sicherheitsverstellung



Art.-Nr. 1265K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter  
dem Kopfteil (nicht vorstehend),  
für Liegenbreite 700 mm

## Seitensicherung



Art.-Nr. 1040  
1 Stück Seitensicherung abklappbar,  
verchromt, komplett aus Stahlrohr,  
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005  
1 Stück Seitensicherung für Normschiene  
mit Befestigungskloben, komplett aus  
Stahlrohr, Länge 800 mm

## Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655  
Komfortable Kopfteilverstellung  
stufenlos durch Gasdruckfeder,  
Verstellbereich: 0° - +60°

## Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410  
1 Stück Normschiene, 350 mm lang



Art.-Nr. 1430  
1 Befestigungskloben für Normschiene,  
Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450  
1 Infusionsstange für Normschiene,  
ohne Befestigungskloben

## Beinhalter



Art.-Nr. 1510  
Beinhalter mit Kunststoffschale



Art.-Nr. 1520  
Beinhalter nach Göpel

## Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770  
Softpolster für hohen Liegekomfort  
aus Kaltschaum, für Liegenbreite  
700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772  
Polster mittelweich durch Kaltschaum-  
auflage, für Liegenbreite 700 mm,  
Polsterstärke 70 mm

# Serie 2000XL


## 4-teilige Combi-Untersuchungsliege mit hydraulischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Rektoskopie, Gynäkologie ...

Modell 2640-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2640-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2640-04XL/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

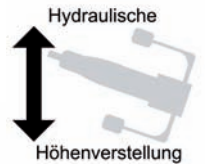

Obere 2 Abb.:  
Modell 2640-01XL/H  
mit Ausstattungsoption:  
Papierrollenhalter (1265K),  
Normschiene (1410),  
Beinhalter (1510);  
Polsterfarbe: 64-174 sky

Alle Abb.:  
Modell 2640-01XL/H in  
Sonderausführung:  
Oberrahmen verchromt



### Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 100 mm
- Seitlich des Sitzteils befindet sich je ein Haltegriff
- Herausziehbare VA-Schale in pflegeleichter HPL-Platte eingesetzt
- Mit Kloben zur Beinhalterbefestigung (Beinhalter = Zubehör)
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 4-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil bis 50° positiv durch Zahnstangensystem verstellbar
- Mittelteillänge: 930 mm
- Rektoteil in der Höhe verstellbar, 100 mm breit
- Sitzteil, mit rundem Ausschnitt, manuell neigbar bis 20°
- Sitzteillänge: 400 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Modell 2640-01XL/H mit Ausstattungsoption:  
Papierrollenhalter (1265K), Normschiene (1410)

### Technische Daten:


- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 640 mm bis 1.060 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Länge der Liegefläche: 1.980 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

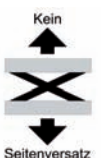



## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1182  
Entfall der serienmäßigen  
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1180N  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral  
feststellbar, Ø 100 mm,  
Grundhöhe + 20 mm

### Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610  
Nasenschlitz, eingepolstert in das  
Kopfteil  
Art.-Nr. 1620  
Füllpolster für Nasenschlitz

### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1265K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter  
dem Kopfteil (nicht vorstehend),  
für Liegenbreite 700 mm

### Seitensicherung



Art.-Nr. 1040  
1 Stück Seitensicherung abklappbar,  
verchromt, komplett aus Stahlrohr,  
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005  
1 Stück Seitensicherung für Normschiene  
mit Befestigungskloben, komplett aus  
Stahlrohr, Länge 800 mm

### Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655  
Komfortable Kopfteilverstellung  
stufenlos durch Gasdruckfeder,  
Verstellbereich: 0° - +60°

### Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410  
1 Stück Normschiene, 350 mm lang



Art.-Nr. 1430  
1 Befestigungskloben für Normschiene,  
Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450  
1 Infusionsstange für Normschiene,  
ohne Befestigungskloben

### Beinhalter



Art.-Nr. 1510  
Beinhalter mit Kunststoffschale



Art.-Nr. 1520  
Beinhalter nach Göpel

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770  
Softpolster für hohen Liegekomfort  
aus Kaltschaum, für Liegenbreite  
700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772  
Polster mittelweich durch Kaltschaum-  
auflage, für Liegenbreite 700 mm,  
Polsterstärke 70 mm

# Serie 2000XL


## 3-teilige Combi-Untersuchungsliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Rektoskopie, Gynäkologie ...

Modell 2645-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2645-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2645-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

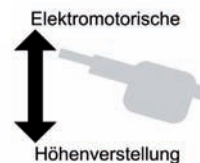

Modell 2645-00XLE mit Ausstattungsoption: Fahrbar auf zentral feststellbaren Rollen (1180N), Fußschalter anstelle von Handschalter; obere Abb. zusätzlich: Beinhalter (1510); Polsterfarbe: 64-173 smaragd



### Grundausstattung:

- Liege fahrbar auf einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 100 mm
- Seitlich des Sitzteils befindet sich je ein Haltegriff
- Herausziehbare VA-Schale in pflegeleichter HPL-Platte eingesetzt
- Mit Kloben zur Beinhalterbefestigung (Beinhalter = Zubehör)
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil bis 50° positiv durch Zahnstangensystem verstellbar
- Mittelteillänge: 930 mm
- Sitzteil, mit rundem Ausschnitt, manuell neigbar bis 20°
- Sitzteillänge: 450 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



### Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 620 mm bis 1.060 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Länge der Liegefläche: 1.980 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



### Design:


Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten

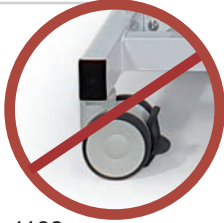

Art.-Nr. 1182  
Entfall der serienmäßigen  
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1180N  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral  
feststellbar, Ø 100 mm,  
Grundhöhe + 20 mm

### Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610  
Nasenschlitz, eingepolstert in das  
Kopfteil  
Art.-Nr. 1620  
Füllpolster für Nasenschlitz


### Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E  
1 Handschalter mit Magnet zur  
Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E  
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem  
Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor  
und verfährt um einige cm in die  
Gegenrichtung

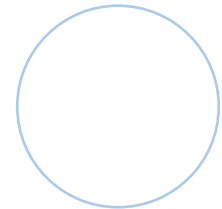

Art.-Nr. 1940-3E  
1 Fixierung für Fußschalter am  
Untergestell montiert

### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1950E  
Längsseitige Fußbedienung mit  
Sicherheitsverstellung



Art.-Nr. 1265K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter  
dem Kopfteil (nicht vorstehend),  
für Liegenbreite 700 mm

### Seitensicherung



Art.-Nr. 1040  
1 Stück Seitensicherung abklappbar,  
verchromt, komplett aus Stahlrohr,  
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005  
1 Stück Seitensicherung für Normschiene  
mit Befestigungskloben, komplett aus  
Stahlrohr, Länge 800 mm



### Kopfteiloptionen

### Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410  
1 Stück Normschiene, 350 mm lang



Art.-Nr. 1430  
1 Befestigungskloben für Normschiene,  
Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450  
1 Infusionsstange für Normschiene,  
ohne Befestigungskloben

### Beinhalter



Art.-Nr. 1510  
Beinhalter mit Kunststoffschale



Art.-Nr. 1520  
Beinhalter nach Göpel

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770  
Softpolster für hohen Liegekomfort  
aus Kaltschaum, für Liegenbreite  
700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772  
Polster mittelweich durch Kaltschaum-  
auflage, für Liegenbreite 700 mm,  
Polsterstärke 70 mm

# Serie 2000XL


## 3-teilige Combi-Untersuchungsliege mit hydraulischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Rektoskopie, Gynäkologie ...

Modell 2645-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2645-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2645-04XL/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

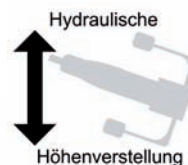


Alle Abb.:  
Modell 2645-01XL/H  
mit Ausstattungsoption:  
Papierrollenhalter (1265K);  
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

in Sonderausführung:  
Oberrahmen verchromt

obere 2 Abb. zusätzlich:  
Beinhalter (1510)



### Grundausstattung:

- Liege fahrbar auf einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 100 mm
- Seitlich des Sitzteils befindet sich je ein Haltegriff
- Herausziehbare VA-Schale in pflegeleichter HPL-Platte eingesetzt
- Mit Kloben zur Beinhalterbefestigung (Beinhalter = Zubehör)
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 


### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil bis 50° positiv durch Zahnstangensystem verstellbar
- Mittelteillänge: 930 mm
- Sitzteil, mit rundem Ausschnitt, manuell neigbar bis 20°
- Sitzteillänge: 450 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



### Technische Daten:

- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 640 mm bis 1.060 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Länge der Liegefläche: 1.980 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet 



### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1182  
Entfall der serienmäßigen  
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1180N  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral  
feststellbar, Ø 100 mm,  
Grundhöhe + 20 mm

### Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610  
Nasenschlitz, eingepolstert in das  
Kopfteil  
Art.-Nr. 1620  
Füllpolster für Nasenschlitz

### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1265K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter  
dem Kopfteil (nicht vorstehend),  
für Liegenbreite 700 mm

### Seitensicherung



Art.-Nr. 1040  
1 Stück Seitensicherung abklappbar,  
verchromt, komplett aus Stahlrohr,  
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005  
1 Stück Seitensicherung für Normschiene  
mit Befestigungskloben, komplett aus  
Stahlrohr, Länge 800 mm

### Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655  
Komfortable Kopfteilverstellung  
stufenlos durch Gasdruckfeder,  
Verstellbereich: 0° - +60°

### Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410  
1 Stück Normschiene, 350 mm lang



Art.-Nr. 1430  
1 Befestigungskloben für Normschiene,  
Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450  
1 Infusionsstange für Normschiene,  
ohne Befestigungskloben

### Beinhalter



Art.-Nr. 1510  
Beinhalter mit Kunststoffschale



Art.-Nr. 1520  
Beinhalter nach Göpel

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770  
Softpolster für hohen Liegekomfort  
aus Kaltschaum, für Liegenbreite  
700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772  
Polster mittelweich durch Kaltschaum-  
auflage, für Liegenbreite 700 mm,  
Polsterstärke 70 mm

# Serie 2000XL

## 3-teilige Combi-Untersuchungsliege mit elektromotorischer Höhen- und Neigungsverstellung ... für Untersuchung, Rektoskopie, Gynäkologie ...

Modell 2648-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2648-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2648-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Modell 2648-00XLE mit Ausstattungsoption:  
Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit (1182), fahrbar auf zentral feststellbaren Rollen (1180N), Papierrollenhalter 1265K, Höhenverstellung durch Fußschalter anstelle von Handschalter; obere Abb. zusätzlich: Beinhalter nach Göpel (1520); Polsterfarbe: 64-715 anthracite

### Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 100 mm
- Seitlich des Sitzteils befindet sich je ein Haltegriff
- Mit Kloben zur Beinhalterbefestigung (Beinhalter = Zubehör)
- Herausziehbare VA-Schale in pflegeleichter HPL-Platte eingesetzt
- Bedienung des Elektromotors für die Höhenverstellung durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Elektromotorische Neigungsverstellung der gesamten Liegefläche bis  $-15^\circ$ , Bedienung durch einen separaten Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung der Elektromotoren (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor für die Höhenverstellung, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil bis  $30^\circ$  positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil bis  $50^\circ$  positiv durch Zahnstangensystem verstellbar
- Mittelteillänge: 930 mm
- Sitzteil, mit rundem Ausschnitt, manuell neigbar bis  $20^\circ$
- Sitzteillänge: 450 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



### Technische Daten:


- Elektromotorisch höhenverstellbar von 650 mm bis 1.090 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



### Design:


Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

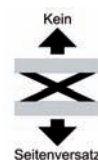

## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten

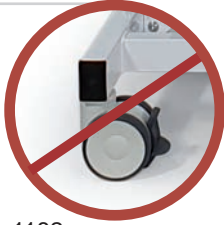


Art.-Nr. 1182  
Entfall der serienmäßigen  
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1180N  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral  
feststellbar, Ø 100 mm,  
Grundhöhe + 20 mm

### Nasenschlitz

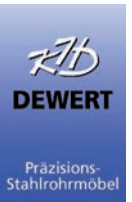

Art.-Nr. 1610  
Nasenschlitz, eingepolstert in das  
Kopfteil  
Art.-Nr. 1620  
Füllpolster für Nasenschlitz


### Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E  
1 Handschalter mit Magnet zur  
Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E  
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem  
Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor  
und verfährt um einige cm in die  
Gegenrichtung

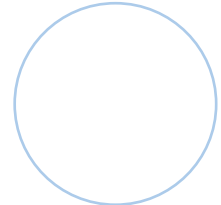

Art.-Nr. 1940-3E  
1 Fixierung für Fußschalter am  
Untergestell montiert



Art.-Nr. 1950E  
Längsseitige Fußbedienung mit  
Sicherheitsverstellung

### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1265K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter  
dem Kopfteil (nicht vorstehend),  
für Liegenbreite 700 mm

### Seitensicherung



Art.-Nr. 1040  
1 Stück Seitensicherung abklappbar,  
verchromt, komplett aus Stahlrohr,  
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005  
1 Stück Seitensicherung für Normschiene  
mit Befestigungskloben, komplett aus  
Stahlrohr, Länge 800 mm

### Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655  
Komfortable Kopfteilverstellung  
stufenlos durch Gasdruckfeder,  
Verstellbereich: 0° - +60°

### Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410  
1 Stück Normschiene, 350 mm lang



Art.-Nr. 1430  
1 Befestigungskloben für Normschiene,  
Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450  
1 Infusionsstange für Normschiene,  
ohne Befestigungskloben

### Beinhalter



Art.-Nr. 1510  
Beinhalter mit Kunststoffschale



Art.-Nr. 1520  
Beinhalter nach Göpel

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770  
Softpolster für hohen Liegekomfort  
aus Kaltschaum, für Liegenbreite  
700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772  
Polster mittelweich durch Kaltschaum-  
auflage, für Liegenbreite 700 mm,  
Polsterstärke 70 mm



**DEWERT**

Präzisions-  
Stahlrohrmöbel

K.H. Dewert GmbH  
Vollmestraße 7  
33649 Bielefeld  
Germany

Telefon + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-0  
Fax + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-27

Internet: [www.khdewert.de](http://www.khdewert.de)  
E-Mail: [info@khdewert.de](mailto:info@khdewert.de)  
YouTube: K.H. Dewert

Änderungen der technischen Daten und Irrtümer vorbehalten.  
Maße sind ca.-Angaben.  
Druck- & Anzeigentechnisch kann es zu Farbabweichungen kommen.  
Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

# COMBI - UNTERSUCHUNGLIEGEN FÜR UNTERSUCHUNG, REKTOSKOPIE, GYNÄKOLOGIE



Die gesamte Dewert-Produktpalette mit zusätzlichen Zubehörartikeln  
finden Sie auf unserer Internetseite  
und in den weiteren Katalogen. Wir freuen uns auf Sie!

01.2025\_01

LIEGEN FÜR PRAXIS UND KRANKENHAUS

SERIE 2000XL

